



## Справочник

Не е необходимо кодиране  
Количество на пробата – 0,5 микролитра  
Времетраене на теста – 6 сек.\*  
Памет – 1865 тестови резултата

**ВАЖНО:** Вижте своя справочник на потребителя на BGStar® за по-подробна информация стъпка по стъпка за начина на извършване на теста.

С вашата система BGStar® можете да тествате вашата кръвна глюкоза от своите пръсти, длани (в основата на палеца) или предмишници (вижте справочника на потребителя за точните места).



### Кръвен глюкомер

- 1) Дисплей
- 2) Бутон ПРОВЕРКА
- 3) Бутон за фоновото осветление
- 4) Бутон стрелка НАДОЛУ
- 5) Бутон стрелка НАГОРЕ
- 6) Отвор за лентичка

### Тест-лентичка

- 1) Контактни пластинки
- 2) Наблюдателно прозорче за запълването
- 3) Зона за пробата



### Прободащо устройство

- 1) Ръкохватка за насочване
- 2) Кръгъл регулатор на дълбочината
- 3) Индикаторно прозорче за дълбочината
- 4) Бутон за задействане
- 5) Чашка на държача на ланцета
- 6) Чашка на прободащото устройство
- 7) Алтернативна капачка за тестване на място
- 8) Ланцет
- 9) Капачка на ланцета

\*Средно времетраене на теста.

### Последователност на теста за кръвна глюкоза

(За пълните инструкции вижте своя справочник на потребителя на BGStar®)

#### 1 Уред:

Вкарайте тест-лентичката с контактните пластинки нагоре в отвора за тест-лентичката. Уредът ще се активира автоматично.

**ВНИМАНИЕ:** За гарантиране на точни резултати измивайте ръцете си с топла, сапунена вода и ги подсушавайте преди всеки тест.



#### 2 Прободете мястото на теста:

Вижте инструкциите за начина на подготовка на устройството за прободане отдясно.


Притиснете прободащото устройство върху мястото, което ще бъде прободано. Натиснете бутона за задействане.



#### 3 Получаване на капка кръв:


Избършете първата капка кръв, която се появи, с помощта на чиста тъкан или хартиена салфетка.

Изстискайте пръста си от основата към върха, докато се оформи втора валка капка кръв.

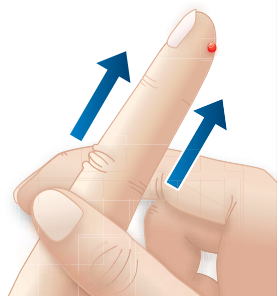

#### 4 Поставяне на тест-лентичка към кръвната проба:


Тест-лентичката изтегля кръвта в себе си през зоната за пробата.

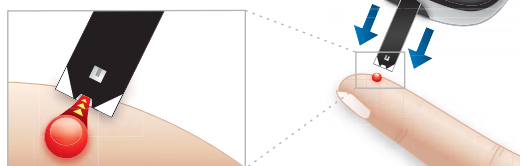

#### 5 Отстранете тест-лентичката от кръвната проба, когато чуете звуков сигнал:

Вашият уред ще издаде звуков сигнал, когато трябва да отстраните тест-лентичката от кръвната проба. Лентата за скролиране и 1-2-3 указват, че уредът изчислява вашия резултат.

((BEEP))

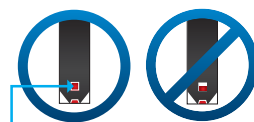

Цялото наблюдателно прозорче за запълването става червено.



#### 6 Последни стъпки:


Вашият тест е завършен, когато тестовият ви резултат за кръвната глюкоза се покаже заедно с часа и датата върху дисплея. Натискането на бутона ПРОВЕРКА потвърждава времето за вземане на пробата и мигането спира.

Отстранете използваната тест-лентичка. Уредът ще се деактивира автоматично. Снемете капачката от прободащото устройство. Поставете отново капачката на ланцета. Отстранете използвания ланцет. Изхвърлете по подходящи начин използваните тест-лентичка и ланцет.



### Подготовка на прободащото устройство


#### 1 Снемете капачката от прободащото устройство.

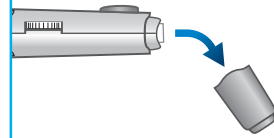


#### 2 Вкарайте новия ланцет в чашката на държача на ланцета.




#### 3 Отвинтете капачката на ланцета.

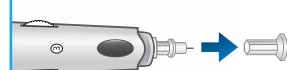

#### 4 Поставете отново капачката на прободащото устройство.

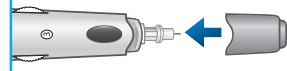

#### 5 Настройте степента на прободане.

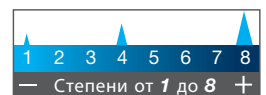

#### 6 Изтеглете насочващата ръкохватка, докато тя щракне.

