

## Guide simplifié

- Aucun codage requis
- Taille de l'échantillon de sang - 0,5 µL
- Durée du test - 6 sec.\*
- Mémoire - 1865 résultats

**IMPORTANT:** Consultez le guide d'utilisation BGStar™ pour obtenir des instructions plus détaillées sur la manière d'effectuer le test.

Le système BGStar™ vous permet de tester votre glycémie sur le bout d'un doigt, la paume de la main (à la base du pouce) ou l'avant-bras (consultez le guide d'utilisation pour connaître les emplacements spécifiques).

## Généralités sur le système BGStar™




### Lecteur de glycémie

- 1) Affichage
- 2) Bouton de SÉLECTION
- 3) Bouton RÉTROÉCLAIRAGE
- 4) Bouton fléché BAS
- 5) Bouton fléché HAUT
- 6) Fente d'insertion



### Bandelette

- 1) Barres de contact
- 2) Fenêtre visuelle de remplissage
- 3) Zone d'échantillon

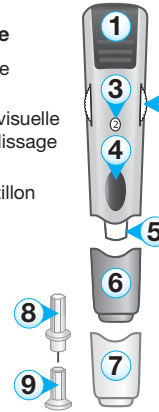

### Stylo autopiqueur

- 1) Bouton d'armement
- 2) Mollette de réglage de profondeur
- 3) Fenêtre indicatrice de profondeur
- 4) Bouton déclencheur
- 5) Support de lancette
- 6) Embout du stylo autopiqueur
- 7) Embout pour les autres sites de test (paume de la main, avant-bras)
- 8) Lancette
- 9) Capuchon de la lancette

\*Durée moyenne du test.

### Étapes pour effectuer un test de glycémie

(Pour les instructions complètes, consultez le guide d'utilisation BGStar™)

#### 1 Insérez une nouvelle bandelette dans le lecteur

Insérez la bandelette dans la fente d'insertion avec les barres de contact orientées vers le haut. Le lecteur sera automatiquement activé.


**ATTENTION:** pour garantir des résultats précis, lavez-vous les mains au savon et à l'eau tiède et séchez-les avant chaque test.



#### 2 Piquez le site de test

Suivez les instructions pour la préparation du stylo autopiqueur (voir les explications à droite).


Appuyez le stylo autopiqueur contre le site à piquer. Appuyez sur le bouton déclencheur.

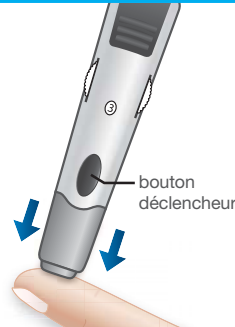

#### 3 Obtenez la goutte de sang


Essayez la première goutte de sang qui fait surface avec un mouchoir ou une serviette en papier.

Faites pression de la base du doigt en remontant vers l'extrémité, jusqu'à ce qu'une deuxième petite goutte de sang soit obtenue.

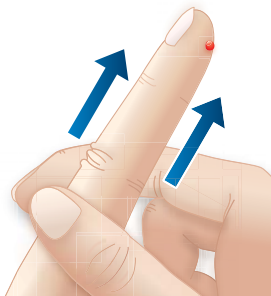


#### 4 Mettez la bandelette en contact avec l'échantillon de sang

La bandelette absorbe le sang par la zone d'échantillon.

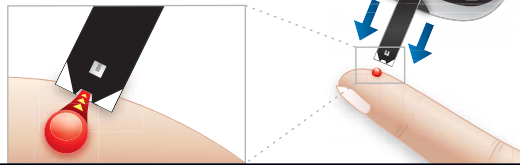

#### 5 Retirez la bandelette de l'échantillon de sang quand vous entendez le bip

Votre lecteur émet un bip quand vous devez retirer la bandelette de l'échantillon de sang. La barre défilante et 1-2-3 indiquent que le lecteur est en train de calculer vos résultats.

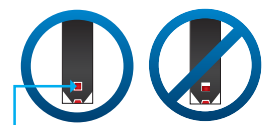


Toute la fenêtre visuelle de remplissage devient rouge.

#### 6 Étapes finales


Votre test est terminé quand votre résultat de glycémie avec l'heure et la date sont indiqués sur l'affichage. Le fait d'appuyer sur le bouton de SÉLECTION confirme l'indicateur de repas, qui s'arrête alors de clignoter.

Retirez la bandelette usagée. Le lecteur est automatiquement désactivé. Détachez l'embout du stylo autopiqueur. Remettez le capuchon de la lancette. Retirez la lancette usagée. Éliminez la bandelette et la lancette conformément à la législation locale en vigueur.

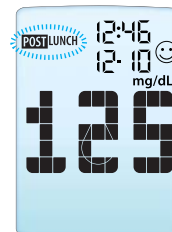

### Préparation du stylo autopiqueur


#### 1 Détachez l'embout du stylo autopiqueur.

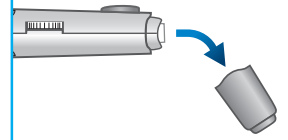


#### 2 Insérez une nouvelle lancette à fond dans le support de lancette.



#### 3 Détachez le capuchon de la lancette en tournant.

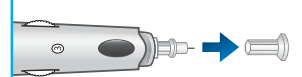

#### 4 Remettez l'embout du stylo autopiqueur.

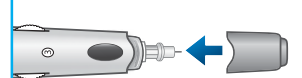

#### 5 Réglez la profondeur de pénétration de la lancette.



#### 6 Tirez le bouton d'armement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

