

संदर्भ
गाइड

किसी कोड की आवश्यकता नहीं
नमूना आकार - 0.5 µL
परीक्षण समय - 6 सेकंड.
मेमोरी - 1865 परीक्षण परिणाम

महत्वपूर्ण: परीक्षण करने की अधिक विस्तृत
चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए अपनी BGStar®
उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को देखें.

अपने BGStar® सिस्टम के साथ, आप ब्लड ग्लूकोज़ को
अपनी उंगली पर, हथेली (अंगूठेके निचले भाग पर) या
बाँह पर माप सकते हैं (सही स्थान के लिए उपयोगकर्ता
मार्गदर्शिका देखें).



ब्लड ग्लूकोज़ मीटर

- 1) डिस्प्ले
- 2) चेक बटन
- 3) बैकलाइट बटन
- 4) डाउन तीर बटन
- 5) अप तीर बटन
- 6) स्ट्रिप पोर्ट


*औसत परीक्षण समय.

BGStar® सिस्टम के बारे में



परीक्षण स्ट्रिप

- 1) संपर्क बार
- 2) विजुअल फिल विंडो
- 3) ब्लड रखने का स्थान

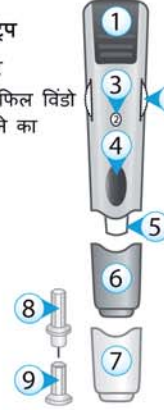

लैंसिंग डिवाइस

- 1) कोकिंग हैंडिल
- 2) गहराई समायोजन डायल
- 3) गहराई सूचक विंडो
- 4) रिलीज़ बटन
- 5) लैंसेट होल्डर कप
- 6) लैंसिंग डिवाइस कप
- 7) वैकल्पिक साइट परीक्षण कैप
- 8) लैंसेट
- 9) लैंसेट कवर

ब्लड ग्लूकोज़ परीक्षण चरण

(संपूर्ण निर्देश देखने के लिए, अपनी BGStar® उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें)

1 मीटर में परीक्षण स्ट्रिप प्रविष्ट करें:

परीक्षण स्ट्रिप की संपर्क बार को ऊपर की ओर रखते हुए, स्ट्रिप को परीक्षण स्ट्रिप पोर्ट में प्रविष्ट करें।
मीटर स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा।

सटीक परिणाम पाने के लिए, अपने हाथों को गर्म, साबुन गर्म, साबुन वाले पानी से धोएँ और प्रत्येक परीक्षण से पहले उन्हें सुखारें।



2 परीक्षण साइट को लैंस करें:

लैंसिंग डिवाइस को तैयार करने के लिए दाईं ओर दिए गए निर्देशों को देखें।

लैंस की जाने वाली साइट पर लैंसिंग डिवाइस को दबाएँ।
रिलीज़ बटन को दबाएँ।



3 ब्लड की बूंद निकालें:

ब्लड की प्रथम बूंद को साफ़ टिश्यू या पेपर तौलिए से साफ़ करें।

अपनी उंगली के निचले भाग को दबाते हुए उंगली के ऊपरी भाग की ओर ले जाएँ, जब तक कि एक छोटी दूसरी ब्लड की बूंद न बन जाए।



4 परीक्षण स्ट्रिप को ब्लड की बूंद के पास ले जाएँ:

परीक्षण स्ट्रिप ब्लड की बूंद से ब्लड को परीक्षण स्ट्रिप के अंदर सोख लेगी।



5 बीप सुनने के बाद ब्लड की बूंद से परीक्षण स्ट्रिप को अलग हटा लें:

जब आप परीक्षण स्ट्रिप को ब्लड की बूंद से अलग हटाएंगे तब आपका मीटर एक बार बीप करेगा नमूना. स्कॉलिंग बार और 1-2-3 दर्शाते हैं कि मीटर आपके परिणाम को परिकलित कर रहा है।



संपूर्ण विजुअल फिल विंडो लाल हो जाएगी।

6 अंतिम चरण:


डिस्प्ले पर जब ब्लड ग्लूकोज़ परीक्षण परिणाम दिनांक और समय के साथ प्रदर्शित होता है तो आपका परीक्षण पूरा हो जाता है। चेक बटन दबाना मीलसमय टैग की पुष्टि करता है और यह प्रलेश करना बंद कर देता है।

उपयोग हुई परीक्षण स्ट्रिप को निकालें।
मीटर स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।
लैंसिंग डिवाइस से कैप को हटाएँ। लैंसेट कवर को बदलें। उपयोग हुई लैंसेट को निकालें।
उपयोग हुई परीक्षण स्ट्रिप और लैंसेट को उपयुक्त तरीके से फेंक दें।



लैंसिंग डिवाइस को तैयार करना

1 लैंसिंग डिवाइस से कैप को हटाएँ.

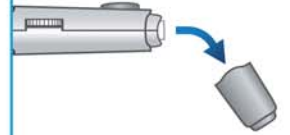

2 लैंसिंग होल्डर कप में एक नए लैंसेट को मजबूती से लगाएँ.



3 लैंसेट कवर को घुमा कर निकालें.



4 लैंसिंग डिवाइस कैप को लगाएँ.



5 लैंसिंग स्तर को सेट करें.



6 कोकिंग हैंडिल के क्लिक करने तक उसे बाहर की ओर खींचें.

