



Упутство за употребу

Није потребно кодирање
Величина узорка – 0,5 µl
Време тестирања – 6 сек.*
Меморија – 1865 резултата тестирања

ВАЖНО: Погледајте ваше BGStar® упутство за детаљније смернице корак по корак о томе како обавити тестирање.

Са вашим BGStar® системом, можете да тестирате глукозу у крви са јагодице прста, длана (у основи палца) или надлактице (за тачне локације погледајте корисничко упутство).



Мерач глукозе у крви

- 1) Дисплеј
- 2) Дугме за ПОТВРДУ
- 3) Дугме за позадинско осветљење
- 4) Дугме са стрелицом надоле
- 5) Дугме са стрелицом нагоре
- 6) Отвор за траку

Тест трака

- 1) Контакт траке
- 2) Прозор за визуелно праћење пуњења
- 3) Простор за узорак



Ланцетар

- 1) Ручица за активацију
- 2) Биращ подешавања дубине
- 3) Прозор индикатора за дубину
- 4) Дугме за отпуштање
- 5) Чашича држача ланцета
- 6) Чашича ланцетара
- 7) Поклопац за тестирање на алтернативном месту
- 8) Ланцета
- 9) Поклопац ланцете

*Просечно време тестирања.

Кораци за тестирање глукозе у крви

(За комплетна упутства, погледајте корисничко упутство за BGStar®)

1 Убаците тест траку у мерач.

Убаците тест траку, тако да контакт траке буду окренуте нагоре, у отвор за тест траку. Мерач ће се аутоматски активирати.

ОПРЕЗ: Да бисте осигурали тачне резултате, пре сваког тестирања оперите руке сапуном и топлом водом и осушите их.



2 Боцните место за тестирање:

Како да припремите ланцетар погледајте упутства на десној страни.


Притисните ланцетаром на подручје које треба да се боцне. Притисните дугме за отпуштање.



3 Добијање капи крви.


Прву кап крви пребришите чистом марамичом или папирним убрусом.

Стегните из основе прста према врху, све док се не формира мала кап крви.

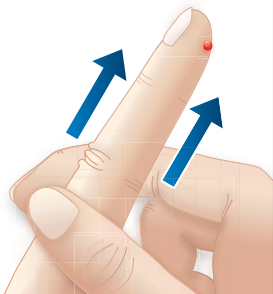


4 Приђите тест траком до узорка крви.

Тест трака упија крв у тест траку преко подручја за узорак.

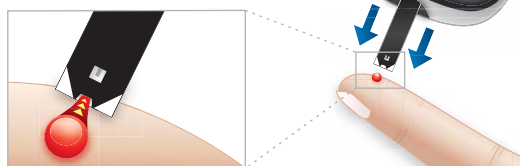

5 Склоните тест траку са узорка крви када чујете звучни сигнал „бип“.

Ваш мерач ће се огласити звучно једанпут, и тада треба да уклоните врх тест траке из узорка крви. Трака која се помера и 1-2-3 означавају да ваш мерач израчунава ваше резултате.

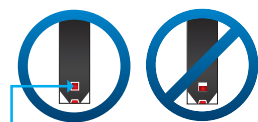


Цео прозор за визуелно праћење пуњења постаје црвен.



6 Финални кораци:


Ваше тестирање је завршено када се на дисплеју прикаже време и датум вашег резултата тестирања глукозе у крви. Притиском на дугме за ПОТВРДУ потврђује се ознака оброка и оно престаје да трепери.

Уклоните употребљену тест траку. Мерач ће се аутоматски деактивирати. Одвртите поклопац са ланцетара. Уклоните поклопац ланцете. Извадите употребљену ланцету. Правилно одложите употребљену тест траку и ланцету.

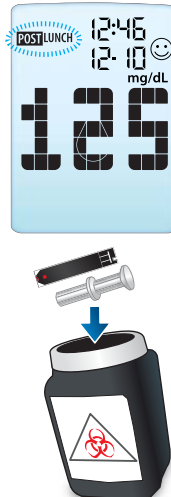

Припрема ланцетара

1 Одвртите поклопац са ланцетара.

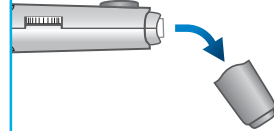

2 Чврсто убаците нову ланцету у чашичу држача ланцета.




3 Одвртите поклопац ланцете.



4 Скините поклопац ланцетара.



5 Подесите ниво убода.

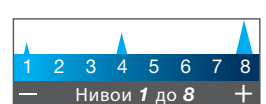

6 Повуците ручицу за активирање све док не кликне.

