

සටහන් මාර්ගෝපදේශය

කේතනය අවස්ථා නැත සාම්පලයේ ජ්රමාණය - 0.5 µL

පරීක්ෂණ වේලාව - තත්පර 6* ස්මරණය - පරීක්ෂණ ජ්රනිඵල 1865 ක්

සටහන:

පරීක්ෂණය සිදුකළ යුත්තේ කෙසේද යන්න විස්තර සඳහා ඔබගේ බීජීස්ටාර් ගිම්කරු මාර්ගෝපදේශය බලන්න.

ඔබගේ බීජීස්ටාර් කට්ටලය මඟින් ඔබගේ ඇඟිලි තුඩින්, (මහපටුඟිල්ලට පහතේ) අත්ලෙන් හෝ යටි බාහුවෙන් ඔබගේ රුධිර ග්ලූකෝස් පරීක්ෂණ කළ හැක (නිසි ස්ථාන සඳහා ගිම්කරු අත්පොත බලන්න).

*සාමාන්‍ය පරීක්ෂණ වේලාව.

බීජීස්ටාර්® ක්රමය ගැන



උපකරණය

- 1) උපකරණය
- 2) සෝදිසි කිරීමේ බොත්තම
- 3) පසු ආලෝක බොත්තම
- 4) යටි ඊතල බොත්තම
- 5) උඩු ඊතල බොත්තම
- 6) තීරු දොරටුව

පරීක්ෂණ තීරුව

- 1) ස්පර්ශ තීරු
- 2) දර්ශක පිරීමේ තීරය
- 3) සාම්පල ජ්රදේශය



විදුම් උපකරණය

- 1) ඔසවන හැඩලය
- 2) ගැඹුර සකස් කිරීමේ අක්වටය
- 3) ගැඹුර පෙන්වන තීරය
- 4) බොත්තම අතහරින්න
- 5) විදුම් කටු ඇල්ලීමේ භාජනය
- 6) විදුම් උපකරණයේ කොපුව
- 7) විකල්ප ස්ථාන පරීක්ෂණ කොපුව
- 8) විදුම් කටුව
- 9) විදුම් කටුවේ කවරය

රුධිර ග්ලූකෝස් පරීක්ෂණ පියවර (සම්පූර්ණ උපදෙස් සඳහා, ඔබගේ බීජීස්ටාර් ගිම්කරු මාර්ගෝපදේශය බලන්න)

1 පරීක්ෂණ තීරුව මීටරයට ඇතුළත් කරන්න:

ස්පර්ශ තීරු උඩුවට තිබෙන ලෙසට පරීක්ෂණ තීරුව පරීක්ෂණ තීරු දොරටුවට ඇතුළත් කරන්න. මීටරය ස්වයංක්රීයව සකරිය වේ.

අවවාදය: නිවැරදි ජ්රනිඵල නගවුරු කර ගැනීම සඳහා, සෑම පරීක්ෂණයකටම පෙර උණුසුම් හා සබන් සහිත වතුරෙන් ඔබගේ අත් සෝදා වේලන්න.



2 පරීක්ෂණ ස්ථානයේ විදීම:

විදුම් උපකරණය ලැස්ති කරන්නේ කෙසේද යන්න උපදෙස් සඳහා දකුණට ඇති උපදෙස් කියවන්න.


විදිය යුතු ස්ථානය මත විදුම් උපකරණය තද කරන්න. අත්හැරීමේ බොත්තම තද කරන්න.



3 රුධිර බිංදුව ලබා ගැනීම:


පළමුවෙන් පෙනෙන රුධිර බිංදුව පිරිසිදු පටකයකින් හෝ කඩදාසි තුවායකින් පිය දමන්න.

දෙවෙනි රුධිර බිංදුවක් ඇතිවන තුරු ඔබගේ ඇඟිලි තුඩ යටින් තද කරන්න.

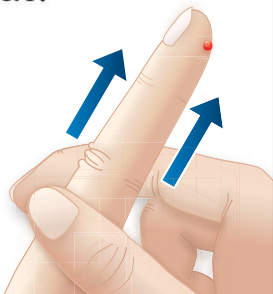

4 පරීක්ෂණ තීරුව රුධිර සාම්පලය වෙත ගෙනෙන්න:

පරීක්ෂණ තීරුව සාම්පල ලබා ගැනීමේ ජ්රදේශය තුළින් රුධිරය පරීක්ෂණ තීරුව තුළට උරා ගනී.

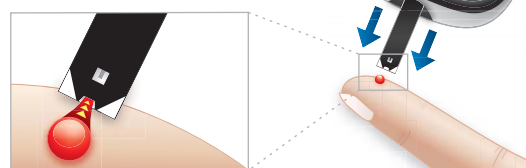

5 ඔබ බීජී ගබ්දය අසන්නට පරීක්ෂණ තීරුව රුධිර සාම්පලයෙන් ඉවත් කරන්න:

ඔබ පරීක්ෂණ තීරුවේ තුඩ රුධිර සාම්පලයෙන් ඉවත් කිරීමට අවස්ථා වන විට ඔබගේ මීටරය වරක් බීජී ගබ්දය නගයි. මීටරය විසින් ඔබගේ ජ්රනිඵල ගණන් කරන බල අනුවලන තීරු සහ 1-2-3 මඟින් පෙන්වනු ලබයි.

දූෂිත පිරීමේ තීරය සම්පූර්ණයෙන්ම රතු බවට පත් වේ.




6 අවසන් පියවර:

ඔබගේ ග්ලූකෝස් පරීක්ෂණ ජ්රනිඵලය එහි වේලාව හා දිනය සමඟ දර්ශකයේ පෙන්වනු ලබන විට ඔබගේ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ වේ.

සෝදිසි කිරීමේ බොත්තම තද කිරීම ආහාර ගැනීමේ වේලාව නගවුරු කරන අතර එය බැබලීම නතර වේ.


භාවිතා කළ පරීක්ෂණ තීරුව ඉවත් කරන්න. මීටරය ස්වයංක්රීයව අක්රීය වේ. විදුම් උපකරණයෙන් කොපුව ගලවා දමන්න.

විදුම් කටුවේ කවරය මාරු කරන්න. භාවිතා කළ විදුම් කටුව ඉවත් කරන්න. භාවිතා කළ පරීක්ෂණ තීරුව සහ විදුම් කටුව නිසි ලෙස අස් කරන්න.

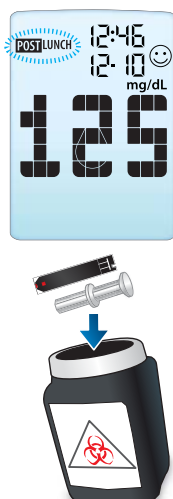

විදුම් උපකරණය ලැස්ති කිරීම


1 අනිත උපකරණයේ කොපුව ගලවා දමන්න.

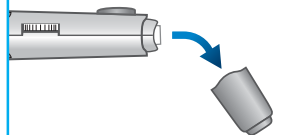


2 විදුම් කටු ඇල්ලීමේ භාජනය තුළට අළුත් විදුම් කටුවක් තදින් ඇතුළත් කරන්න.




3 විදුම් කටුවේ කවරය කරකවා ගලවන්න.

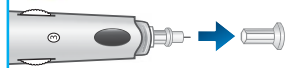

4 විදුම් උපකරණයේ කොපුව මාරු කරන්න.

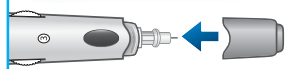

5 විදුම් මට්ටම තබන්න.

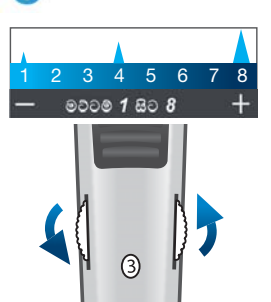

6 කෙළින් ඔසවන හැඩලය වික් ගාන තුරු ඔසවන්න.

