



حوالہ

جاتی رہنما

کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے
نمونہ سائز - 0.5 µL
جانچ کا وقت - 6 سیکنڈ*
میموری - 1865 جانچ کے نتائج

اہم بات: جانچ کرنے کے طریقے سے متعلق مزید تفصیلی قدم بہ قدم رہنما کے لئے اپنے BGStar® کا رہنما برائے مالکان دیکھیں۔

اپنے BGStar® سسٹم کے ساتھ، آپ اپنے انگلی کے پوروں پر، ہتھیلیوں پر (انگوٹھے کی جڑ میں) یا ہاتھ پر خون میں شکر کی جانچ کر سکتے ہیں (حتمی مقامات کے لئے رہنما برائے مالکان دیکھیں)۔

سسٹم کے بارے میں BGStar®

نشر لگانے کا آلہ

- 1) کوکنگ کا دستہ
- 2) گیرانی کے توافق کا ڈائل
- 3) گیرانی کے اشاریہ کا ونڈو
- 4) اجراء کا بٹن
- 5) لانسیت کے بولڈر کا پیالہ
- 6) نشر لگانے کے آلے کا پیالہ
- 7) متبادل جگہ پر جانچ کرنے کا سرپوش
- 8) لانسیت
- 9) لانسیت کا ڈھکن



جانچ والی پٹی

- 1) رابطہ کے بارز
- 2) مرنی طور پر بھرنے کا ونڈو
- 3) نمونہ کا حلقہ



دموی شکر کا میٹر


- 1) ڈسپلے
- 2) جانچ کریں کا بٹن
- 3) عقبی روشنی کا بٹن
- 4) نیچے تیر کا نشان کا بٹن
- 5) اوپر تیر کا نشان کا بٹن
- 6) پٹی کا خانہ



*جانچ کا اوسط وقت۔

نشر لگانے کا آلہ تیار کرنا

- 1 قیف کو نشر لگانے کا آلہ سے جدا کریں۔

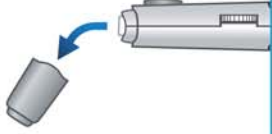

- 2 لانسیت پکڑنے والے پیالے میں ایک نیا لانسیت مضبوطی سے داخل کریں۔



- 3 لانسیت کا ڈھکن مڑوویں۔



- 4 نشر لگانے کے آلے کا قیف بدلیں۔



- 5 نشر لگانے کی سطح متعین کریں۔



- 6 کوکنگ کا دستہ باہر کو کھینچیں یہاں کہ اس سے کلک کی آواز آجائے۔



دموی شکر کی جانچ کرنے کے اقدامات

(مکمل ہدایات کے لئے اپنا BGStar® کا رہنما برائے مالکان دیکھیں)

2 جانچ کی جگہ پر نشر لگائیں:

نشر لگانے کا آلہ تیار کیسے تیار کرنا ہے اس بارے میں ہدایات کے لئے دائیں سمت حوالہ دیکھیں۔

جس جگہ پر نشر لگانا ہے نشر لگانے کا آلہ اس کے مقابل رکھ کر دبائیں۔
اجراء کا بٹن دبائیں۔



4 جانچ والی پٹی خون کے نمونے پر لائیں:

جانچ والی پٹی خون کو نمونہ والی جگہ سے جانچ والی پٹی کے اندر کھینچ لیتی ہے۔



6 حتمی اقدامات:

آپ کے دموی شکر کی جانچ کا نتیجہ مع وقت اور تاریخ ڈسپلے پر دکھائی دینے کے بعد آپ کی جانچ مکمل ہوگئی ہے۔ جانچ کریں بٹن پر دبائے سے کھاتے کے وقت کے ٹیگ کی تصدیق ہوتی ہے اور یہ جھلملانا بند کر دیتا ہے۔



1 جانچ والی پٹی میٹر میں داخل کریں:

جانچ والی پٹی داخل کریں، نیز رابطہ کے بارز اوپر کی رخ پر، جانچ والی پٹی کا خانہ میں ہوں۔
میٹر اپنے آپ چالو ہوجائے گا۔


انتہا: قطعی نتائج یقینی بنانے کے لئے، ہر ایک جانچ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نیم گرم، صابن والے پانی سے دھوئیں اور خشک کریں۔



3 خون کا قطرہ لیں:

ایک سادہ ٹشو یا کاغذی تولیہ استعمال کر کے خارج ہونے والے خون کا پہلا قطرہ پونچھ دیں۔

اپنی انگلی سرپوش کی سمت کر کے اس کی جڑ میں اسے پھینچیں، یہاں تک کہ خون کا ایک دوسرا چھوٹا سا قطرہ اکٹھا ہوجائے۔

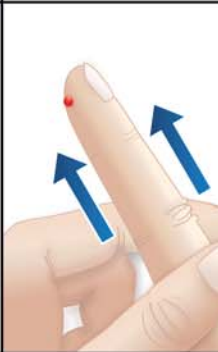

5 جب آپ کو بیپ کی آواز سنائی دے تو جانچ والی پٹی خون کے نمونے سے ہٹائیں:

آپ کے میٹر سے ایک بار بیپ کی آواز آئے گی، اس وقت آپ کو جانچ والی پٹی کا سرپوش خون کے نمونے سے ہٹا لینا چاہیے۔ اسکرولنگ بار اور 1-2-3 اشارہ ہے کہ میٹر آپ کے نتائج کا حساب لگا رہا ہے۔



مرنی طور پر بھرنے کا پورا ونڈو سرخ ہوجائے گا۔